

# Care and Cleaning of your Geo-Matrix Gel Cushion

## Soin et Le Nettoyage De Votre Coussin Gel Geo-Matrix

### Cleaning your Geo-Matrix cushion / Nettoyage De Votre Coussin Geo-Matrix


- For daily cleaning wipe down the cover with soap and water. If fluids do soil the inner layers of the Geo-Matrix cushion follow the instructions below. The covers are machine washable and can go in the dryer on low heat. The Geo-Matrix gel cannot go into the washing machine as it is too heavy and could damage your machine. Spray the gel with a mild non-abrasive detergent and wipe clean. In-house, Blake Medical uses "Urine Off", "Virox" and "Sanicare" to disinfect Geo-Matrix product. Let the gel layers air dry and avoid drying in direct sunlight. Please note: do not use bleach to clean any Geo-Matrix product.
- Les propriétés de nettoyage des coussins de Geo-Matrix sont uniques. Tous les composants du coussin Geo-Matrix sont lavable machine. Cela inclut la poly-fibre externe ou couvertures étanches, la couverture éprouvée du feu, ainsi que le polymère gel couches. Il suffit de désassembler le coussin dans les parties composant et laver sur le cycle délicat dans l'eau tiède. Les composants peuvent alors 'air-dried' ou séchés dans la sècheuse sur un cycle délicat. Évitez de séchage au soleil.

### Reassembling your Geo-Matrix cushion after cleaning / Réassemblage Votre Coussin Geo-Matrix Après Le Nettoyage

- Each cushion cover contains a patch indicating the correct placement and orientation of the gel layers.
- Chaque housse de coussin contient un correctif qui indique la position correcte et l'orientation des couches de gel.


### Geo-Matrix Bronze

- This two-layer cushion is assembled with the blue layer of gel on the bottom with the columns facing down. The second layer (green) is placed on top
- Ce coussin de couche de deux est assemblé avec la couche de gel de colonne grand bleu sur le bas avec la fin ouverte des colonnes vers le bas. La seconde couche (vert) est placée au-dessus de la couche bleue avec la fin ouverte des colonnes face. Les couches sont ensuite recouvertes de la couverture intérieure et insérés dans la couverture extérieure.

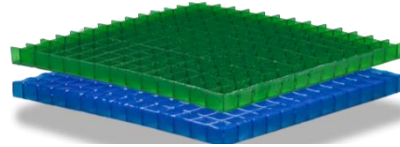



### Geo-Matrix Silver

- This three-layer cushion is assembled with the large column blue layer of gel on the bottom with the open end of the columns facing down. The second large layer is green, and is placed on top of the bottom blue layer with the open end of the columns facing up. The third layer, the pillowtop layer, is then placed on top of the green layer with the columns facing up:
- Ce coussin de trois-couche est assemblé avec la couche de gel de colonne grand bleu au bas avec la fin ouverte des colonnes vers le bas. La seconde couche importante du coussin, la couche verte, est placée au-dessus de la couche bleue avec la fin ouverte des colonnes face. La troisième couche du coussin, la couche bleue petit est alors placée au-dessus de la couche verte avec les colonnes face. Les couches sont ensuite recouvert le matériau éprouvée du feu et insérés dans la couverture.

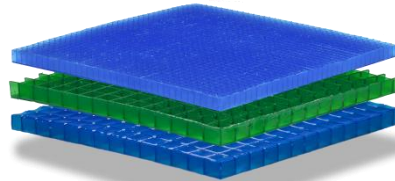

### Geo-Matrix Gold & Gold+

- This three-layer cushion is assembled with the large column blue layer of gel on the bottom with the open end of the columns facing down. The second large layer of the cushion, another blue layer, is placed in top of the bottom blue layer with the open end of the columns facing up. The third layer, either blue or green, is then placed on top of the green layer with the columns facing up. The layers are then covered with the inner incontinent cover and inserted into the outer cover
- Ce coussin de trois-couche est assemblé avec la couche de gel de colonne grand bleu au bas avec la fin ouverte des colonnes vers le bas. La seconde couche importante du coussin, un autre calque bleu, est placée au-dessus de la couche de fond bleu avec la fin ouverte des colonnes face. La troisième couche du coussin, bleu ou vert, est alors placée au-dessus de la couche verte avec les colonnes face. Les couches sont ensuite recouvert le matériau éprouvée du feu et insérés dans la couverture.

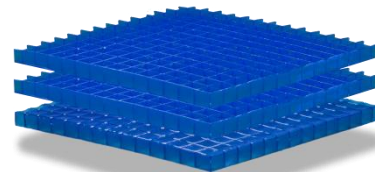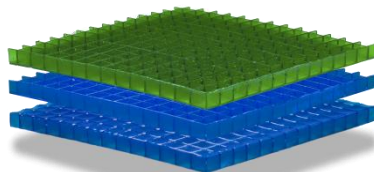

### Care of your Geo-Matrix cushion / Entretien De Votre Geo-Matrix Coussin Mousse

- The cushion is designed to be used at room temperature. If it is subjected to extreme heat or cold, allow the cushion to acclimate to room temperature before using. The gel layers are light sensitive and will begin to breakdown if exposed for prolonged periods to direct sunlight. Avoid air-drying outside and exposure of the gel layers to direct sunlight. The gel layers are designed to be covered with a inner and outer cover, ensure that during reassembly both covers are used.
- Prendre soin de votre coussin Geo-Matrix, c'est simple et direct. Le coussin est conçu pour être utilisé à température ambiante. Si le coussin est soumis à la chaleur extrême ou à froid, autoriser le coussin s'acclimater à la température ambiante avant d'utiliser. Les couches de gel sont sensibles à la lumière et commenceront à répartition si exposé pendant des périodes prolongées à la lumière directe du soleil. Éviter les sécher à l'extérieur et exposition des couches de gel pour diriger la lumière du soleil. Les couches de gel du coussin sont conçues pour être recouvert par des housses intérieure et extérieure. Pour s'assurer que le coussin conserve ses caractéristiques, garantir que, lors du réassemblage, les deux l'éprouvée du feu-housses ont utilisée.

461 Cumberland Avenue, Hamilton, ON L8M 2A8

[www.blakemedical.ca](http://www.blakemedical.ca)



**Blake**  
Medical Distribution

## Care and Cleaning of your Geo-Matrix Foam Cushion Soin et Le Nettoyage De Votre Coussin Mousse Geo-Matrix

### Cleaning your Foam cushion / Nettoyage De Votre Coussin de Mousse

• For daily cleanings all that is needed is a wipe down of the outer cover. This outer cover is fluid proof fabric and will prevent most fluids from permeating into the Geo-Matrix gel inside. For these daily cleanings soap and water will be all that is needed. If fluids do soil the inner layers of the Geo-Matrix cushion follow the instructions below.

The cleaning properties of the Geo-Matrix cushion are unique; the covers are machine washable and can go in the dryer on low heat. To clean, disassemble the cushion into the component parts and wash the cover on a delicate cycle. Avoid drying in direct sunlight.

To clean the Geo-Matrix gel, spray it with a mild non-abrasive detergent and wipe clean. In-house, Blake Medical uses "Urine Off", "Virox" and "Sanicare" to disinfect Geo-Matrix product. Feel free to contact us with any questions about a disinfectant you may have prior to its use.

Please note: do not use bleach to clean any Geo-Matrix product.


• Les propriétés de nettoyage des coussins de Mousse Geo-Matrix sont uniques. Les couvertures sont lavables à la machine. Les couches de gel sont aussi lavables, mais parce qu'ils sont collés aux couches de mousse, ils ne peuvent pas être lavés en la machine. Plutôt, les couches de gels peuvent être lavées avec un détergent doux et un chiffon humide. Note: Gardez les couches de mousses loin de liquides. Évitez de séchage au soleil. NE PAS UTILISÉ LES AGENTS DE BLANCHIMENT.

### Geo-Matrix Hybrid + Hybrid Deep

• The Hybrid and Hybrid Deep cushions have 2 layers of a foam base covered by a layer of gel. Therefore, it is just the top layer that requires cleaning. To do so, spray a mild detergent and wipe clean with a damp cloth. Then the cushion can be turned upside down to air dry.

The layers are covered with the inner incontinent cover and inserted into the outer cover which can be machine washed and dried.

• Les coussins Hybride et Hybride-Profond ont deux couches de mousse sous un recouvrement de gel. Donc, c'est seulement la première couche de gel qui exigera le nettoyage. Pour ce faire, utilisez un détergent doux, et essuyez avec un chiffon humide. Puis, le coussin peut être tourné sens dessus dessous pour sécher. Les couches sont ensuite recouvertes de la couverture d'incontinence intérieure et insérés dans la couverture extérieure que peut être lavée à la machine et séchée.

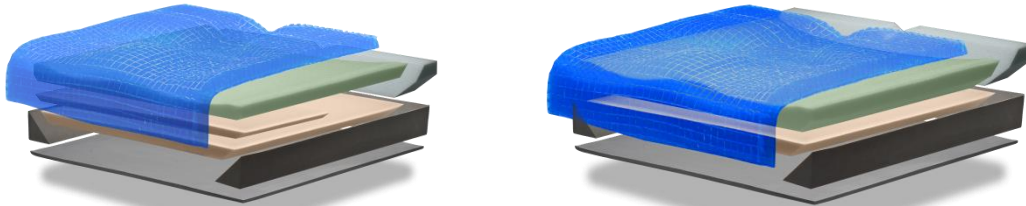


### Geo-Matrix Platinum

• The platinum cushion has a layer of compression cut foam between a base gel layer and the top gel layer. Therefore both the top and bottom layer can be cleaned using a mild detergent and a damp cloth. The layers are then covered with the inner incontinent cover and inserted into the outer cover and both can be machine washed and dried.

• Le coussin Platine a une coupe de pression contraire utilisée entre la base et le recouvrement de gel. Donc, tant la couche supérieure et la couche inférieure peut être nettoyé à l'aide d'un détergent doux et un chiffon humide. Les couvertures d'incontinence intérieure et insérés dans la couverture et séchée.

couches sont ensuite recouvertes de la couverture extérieure que peut être lavée à la machine

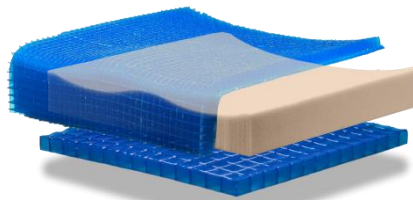

### Care of your Geo-Matrix Foam cushion / Entretien De Votre Geo-Matrix Coussin Mousse

• The cushion is designed to be used at room temperature. If it is subjected to extreme heat or cold, allow the cushion to acclimate to room temperature before using. The gel layers are light sensitive and will begin to breakdown if exposed for prolonged periods to direct sunlight. Avoid air-drying outside and exposure of the gel layers to direct sunlight.

The gel layers are designed to be covered with an inner and outer cover. To ensure that the cushion retains its fire retardant characteristics, ensure that during reassembly both covers are used.

• Prendre soin de votre coussin Geo-Matrix, c'est simple et direct. Le coussin est conçu pour être utilisé à température ambiante. Si le coussin est soumis à la chaleur extrême ou à froid, autoriser le coussin s'acclimater à la température ambiante avant d'utiliser.

Les couches de gel sont sensibles à la lumière et commenceront à répartition si exposé pendant des périodes prolongées à la lumière directe du soleil. Éviter les sécher à l'extérieur et exposition des couches de gel pour diriger la lumière du soleil.

Les couches de gel du coussin sont conçues pour être recouvert par des housses intérieure et extérieure. Pour s'assurer que le coussin conserve ses caractéristiques, garantir que, lors du réassemblage, les deux l'épreuve du feu-housses ont utilisée.

461 Cumberland Avenue, Hamilton, ON L8M 2A8

[www.blakemedical.ca](http://www.blakemedical.ca)