

Care & Cleaning

Geo-Matrix™ Cushion

Soin et Le Nettoyage De

Votre Coussin Geo-Matrix^{MC}



Blake
Medical Distribution

1-866-662-3459
www.blakemedical.ca



Cleaning your Geo-Matrix™ cushion Nettoyage De Votre Coussin Geo-Matrix™C



For daily cleaning wipe down the cover with soap and water. If fluids do soil the inner layers of the Geo-Matrix™ cushion, follow the instructions below.

Covers

Remove all contamination with cloth or paper towel, then wipe the surface with any of the following. 3M Hard Surface Disinfectant Cleaner Wipes, Wood Wyant ED Disinfectant, Virox 5, Oxvir TB, Virex® II 256 One-step Disinfectant Cleaner & Deodorant, Virex II 128 One-step Disinfectant Cleaner, Sanikleen and Super Sani Cloth Germicidal Disposable Wipe. Next disinfect liberally with any of the above wipes (avoid pooling of the disinfectant), wipe dry after 1-3 minutes. Next wipe the surface with a damp cloth and mild soap and finally a damp cloth with liberal amounts of water. Both covers are machine washable, up to 60 degrees C. Do not wring, lay flat to dry.

Couvertures

Retirez toute contamination avec un tissu ou une serviette en papier puis essuyez la surface avec l'une des méthodes suivantes : Lingettes nettoyantes désinfectantes pour surfaces dures 3M, désinfectant Wood Wyant ED, Virox 5, Oxvir TB, Virex® II 256 Nettoyant et déodorant désinfectant en une étape, Virex II 128 Nettoyant désinfectant en une étape, Sanikleen et Super Sani Tissu lingette germicide jetable. Ensuite, désinfectez généreusement avec l'une des lingettes ci-dessus (évitiez la mise en commun du désinfectant) puis essuyez après 1 à 3 minutes. Essuyez ensuite la surface avec un tissu humide et un savon doux et enfin un tissu humide avec de grandes quantités d'eau. Les deux housses sont lavables en machine, jusqu'à 60 degrés C. Ne pas essorer, sécher à plat.

Gel Sheets

The Geo-Matrix™ gel can go into a front load washing machine with no agitator a single gel sheet at a time. If your gel cushion is bonded it can not go into the washing machine. Use liquid detergent only with no bleach in any temperature water. If hand washing spray the gel with a mild non-abrasive detergent and wipe clean. In-house, Blake Medical uses “Urine Off”, “Virox” and “Sanicare” to disinfect Geo-Matrix™ product. Let the gel layers air dry and avoid drying in direct sunlight. Please note: do not use bleach to clean any Geo-Matrix™ product.

Feuilles de Gel

Le gel Geo-Matrix^{MC} peut entrer dans une machine à laver à chargement frontal sans agitateur (laver sur le cycle délicat), une seule feuille de gel à la fois. Si votre coussin de gel est collé, il ne peut pas entrer dans la machine à laver. Utilisez un détergent liquide uniquement sans javellisant dans une eau à toute température. En cas de lavage à la main, vaporisez le gel avec un détergent doux non abrasif et essuyez-le. Chez nous, Blake Medical utilise « Urine Off », «Virox» et «Sanicare» pour désinfecter le produit Geo-Matrix^{MC}. Laissez les couches de gel sécher à l'air et évitez de sécher à la lumière directe du soleil. Remarque : n'utilisez pas d'eau de Javel pour nettoyer les produits Geo-Matrix^{MC}.

Gel / Foam

To clean the Geo-Matrix™ gel, spray it with a mild non-abrasive detergent and wipe clean. In-house, Blake Medical uses “Urine Off”, “Virox” and “Sanicare” to disinfect Geo-Matrix™ product. Feel free to contact us with any questions about a disinfectant you may have prior to its use. Please note: do not use bleach to clean any Geo-Matrix™ product. **DO NOT WET FOAM.** Then the cushion can be turned upside down to air dry. Once dry put inner and outer cover back on.

Gel / Mousse

Pour nettoyer le gel Geo-Matrix^{MC}, vaporisez-le avec un détergent doux non abrasif et essuyez-le. Chez nous, Blake Medical utilise « Urine Off », «Virox» et «Sanicare» pour désinfecter le produit Geo-Matrix^{MC}. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant un désinfectant avant son utilisation. Remarque : n'utilisez pas d'eau de Javel pour nettoyer les produits Geo-Matrix^{MC}. **NE PAS MOUILLER LA MOUSSE.** Ensuite, le coussin peut être retourné pour sécher à l'air. Une fois sec, remettez les couvertures intérieur et extérieur.



Care of your Geo-Matrix™ Cushion

The cushion is designed to be used at room temperature. If it is subjected to extreme heat or cold, allow the cushion to acclimate to room temperature before using. The gel layers are light sensitive and will begin to breakdown if exposed for prolonged periods to direct sunlight. Avoid air-drying outside and exposure of the gel layers to direct sunlight. The gel layers are designed to be covered with an inner and outer cover, ensure that during reassembly both covers are used.

Entretien de votre Coussin Geo-Matrix^{MC}

Le coussin est conçu pour être utilisé à température ambiante. S'il est soumis à une chaleur ou un froid extrême, laissez le coussin s'acclimater à la température ambiante avant de l'utiliser. Les couches de gel sont sensibles à la lumière et commenceront à se décomposer si elles sont exposées pendant de longues périodes à la lumière du soleil. Évitez de sécher à l'extérieur et d'exposer les couches de gel au rayon du soleil. Les couches de gel sont conçues pour être recouvertes d'un revêtement intérieur et extérieur et assurez-vous que lors du remontage, les deux couvertures sont utilisés.

Reassembling your Geo-Matrix™ cushion after cleaning

Each cushion cover contains a patch that indicates the correct placement and orientation of the gel layers.


Réassemblage Votre Coussin Geo-Matrix^{MC} Après Le Nettoyage

Chaque housse de coussin contient un correctif qui indique la position correcte et l'orientation des couches de gel.


Bronze



Silver

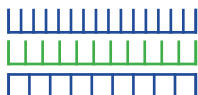

Gold

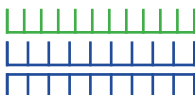

Gold +

