

Cleaning Instructions

Geo-Matrix™ Mattress

Nettoyage de votre

Matelas Geo-Matrix^{MC}



Blake
Medical Distribution

1-866-662-3459
www.blakemedical.ca



G Series Mattress Cleaning Instructions

Cleaning your Geo-Matrix™ Mattress

Geo-Matrix™ mattresses all have a foam base with inserts of gel. Any mattress with exposed gel can be cleaned, all other gel that has a fabric layer adhered to it can not be wiped. Do not wet this fabric. To clean the exposed gel inserts, spray it with a mild non-abrasive detergent and wipe clean with a damp cloth. In-house, Blake Medical uses “Urine Off”, “Virox” and “Sanicare” to disinfect Geo-Matrix™ product. Feel free to contact us with any questions about a disinfectant you may have prior to its use. Please note: do not use bleach to clean any Geo-Matrix™ product. **DO NOT WET FOAM.** The mattress can then be turned upside down to air dry. Avoid drying mattress in direct sunlight.

Cleaning your Mattress Cover

The mattresses are covered with an incontinent wipeable fabric. To clean remove all contamination with cloth or paper towel, then wipe the surface with any of the following. 3M Hard Surface Disinfectant Cleaner Wipes, Wood Wyant ED Disinfectant, Virox 5, Oxvir TB, Virex @ II 256 One-step Disinfectant Cleaner & Deodorant, Virex II 128 One-step Disinfectant Cleaner, Sanikleen and Super Sani Cloth Germicidal Disposable Wipe. Next disinfect liberally with any of the above wipes (avoid pooling of the disinfectant), wipe dry after 1-3 minutes. Next wipe the surface with a damp cloth and mild soap and finally a damp cloth with liberal amounts of water. The cover is also machine washable up to 60 degrees C and should be hanged to dry. **DO NOT USE BLEACH** when cleaning the cover, the G3 mattress cover fabric is the only one that supports the use of bleach and can be used on this cover only.

Maximum Washing Temperature: 60 degrees

If cover becomes excessively soiled, replace with a new cover.

Care of your Geo-Matrix™ Mattress

The mattresses are designed to be used at room temperature. If it is subjected to extreme heat or cold, allow the mattress time to acclimate to room temperature before using. The gel and foam are light sensitive and will begin to breakdown if exposed for prolonged periods to direct sunlight. Avoid air-drying outside and exposure of the mattress to direct sunlight. *(Images on back)*

Instructions de nettoyage du matelas série G

Nettoyage de votre matelas Geo-Matrix^{MC}

Les matelas Geo-Matrix^{MC} ont tous une base en mousse qui sont insérés de gel. Tout matelas avec du gel exposé peut être nettoyé sauf les autres gels sur lequel une couche de tissu adhère ne peut pas être essuyé. Ne mouillez pas ce tissu. Pour nettoyer les insertions de gel exposés, vaporisez-les avec un détergent doux non abrasif et essuyez-les avec un tissu humide. Chez nous, Blake Medical utilise «Urine Off», «Virox» et «Sanicare» pour désinfecter le produit Geo-Matrix^{MC}. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant un désinfectant que vous pourriez avoir avant son utilisation. Remarque: n'utilisez pas d'eau de Javel pour nettoyer les produits Geo-Matrix^{MC}. **NE PAS MOILLER LA MOUSSE.** Le matelas peut ensuite être retourné pour sécher à l'air. Évitez de sécher le matelas à la lumière directe du soleil.

Nettoyage de votre housse de matelas:

Les matelas sont recouverts d'un tissu essuyable incontinent. Pour nettoyer, retirez toute contamination avec un tissu ou une serviette en papier, puis essuyez la surface avec l'une des méthodes suivantes. Lingettes nettoyantes désinfectantes pour surfaces dures 3M, désinfectant Wood Wyant ED, Virox 5, Oxvir TB, Virex ® II 256 Nettoyant et déodorant désinfectant en une étape, Virex II 128 Nettoyant désinfectant en une étape, Sanikleen et Super Sani lingette germicide jetable. Ensuite, désinfectez généreusement avec l'une des lingettes ci-dessus (évitez la mise en commun du désinfectant), essuyez après 1 à 3 minutes. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon humide et un savon doux et enfin une lingette humide avec de généreuses quantités d'eau. La housse est également lavable en machine jusqu'à 60 ° C et doit être suspendue pour sécher. **N'UTILISEZ PAS DE BLANCHIMENT** lors du nettoyage de la housse. Le tissu de la housse de matelas G3 est le seul qui prend d'eau de javel et ne peut être utilisé que sur cette housse seulement.

Température de lavage maximale: 60 degrés Celsius


Si la couverture devient excessivement sale, remplacez-le par une nouvelle couverture.

Entretien de votre matelas Geo-Matrix^{MC}


Les matelas sont conçus pour être utilisés à température ambiante. S'il est soumis à une chaleur ou un froid extrême, laissez le matelas s'acclimater à la température ambiante avant de l'utiliser. Le gel et la mousse sont sensibles à la lumière et commenceront à se décomposer s'ils sont exposés pendant des périodes prolongées à la lumière directe du soleil. Évitez de sécher à l'extérieur et d'exposer le matelas à la lumière directe du soleil.

(Images on back)


B

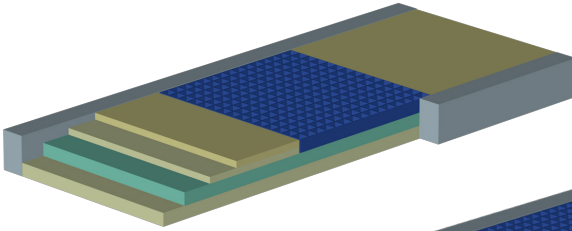


G1 Single

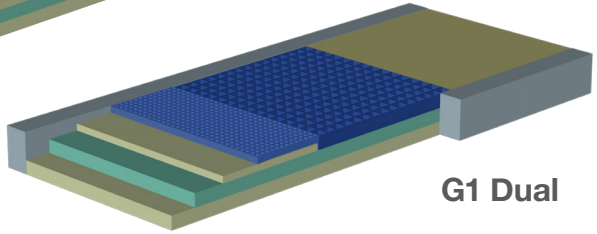

G1 Dual

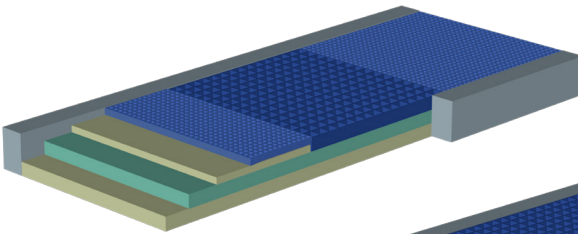

G2

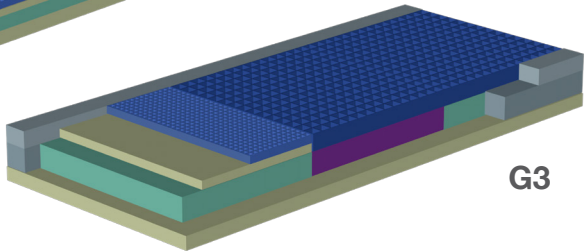

G3